



傲锐赛思生物科技（成都）有限公司
Oriscience Biotechnology Co., Ltd

产品目录 (2025版)

Product Catalog 

企业简介

傲锐赛思生物科技(成都)有限公司(Oriscience Biotechnology Co., Ltd)，公司名称源自 “The origin of science”，寓意为“源于科学、服务科学”。傲锐赛思以高效服务生物医药科学研究及产业为己任，秉承“质量高、价格优、本土化、定制化”理念，为用户提供涵盖分子生物学、细胞生物学、免疫学等领域的高质量产品。傲锐赛思拥有先进的技术平台和研发队伍，所有产品完全独立自主研发及生产。现有产品广泛应用于基础科学研究、高通量测序、疫苗研发等领域。傲锐赛思紧跟科学前沿，在细胞治疗、肿瘤免疫、类器官、合成生物学等前沿学科领域正积极布局产品管线，未来将以高质量的国产试剂更广泛地助力生物医药创新研究。





产品订购须知

- 1、为了保证您的权益与售后，请从正规渠道购买傲锐赛思产品；
- 2、收到货品时，请仔细清点并核对；
- 3、我们承诺您收到的产品质量都将经过严格的检验，保证产品质量，并将提供从订单直至售后的全方位服务。

客户服务与技术支持

如果您在产品使用过程中有任何技术问题，可通过以下方式获取技术支持：

全国免费热线：400-158-2128

订购邮箱：order@oriscience.com

技术支持邮箱：technical_support@oriscience.com

另外您可登录www.oriscience.com，或扫描关注我们的公众号，获取更多产品及技术信息





随着生命科学研究的不断深入，核酸的分离纯化技术在分子生物学中占据了重要地位。核酸分离纯化主要包括：裂解和纯化。这是许多分子生物学实验开始的第一步，也是关键的一步。核酸的质量，产量以及纯度都是影响下游实验的直接因素，如DNA序列分析，PCR,以及各种酶促反应等。傲锐赛思推出了一系列核酸提取和检测试剂盒，专业的团队，优质的产品，竭诚服务您的科研工作。

Orizol RNA Extraction Reagent (RNA提取试剂)



产品特点与优势

- 裂解性强---基于苯酚和异硫氰酸胍，拥有出色的裂解能力
- 范围广---广泛适用于动植物细胞、组织及微生物等
- 快速省时---操作简单，1h内即可完成提取过程
- 纯度高---提取的RNA完整性好，无DNA与蛋白污染


产品概述

Orizol是一种即用型RNA抽提试剂，适用于动植物细胞、组织及细菌的RNA抽提。该试剂可在迅速裂解细胞或组织的同时灭活细胞释放出的核酸酶，保持RNA的完整性，提取的RNA无DNA与蛋白污染，可直接用于qPCR、Northern blot、dot blot、cDNA克隆、体外翻译等。

操作流程



性能展示

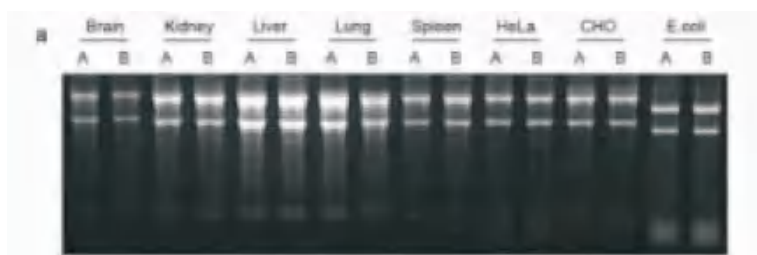

Orizol RNA Extraction Reagent(A)与T品牌RNA提取试剂。

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB301-100 mL	Orizol RNA Extraction Reagent (RNA提取试剂)	100 mL	500.00
NB301-2x100 mL	Orizol RNA Extraction Reagent (RNA提取试剂)	2x100 mL	900.00



Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit (无氯仿RNA提取试剂盒)



产品特点与优势

- 应用广泛---广泛适用于动植物细胞、组织及微生物等
- 安全低毒---无需使用氯仿等有毒试剂
- 纯度高---提取的RNA完整性好，无DNA与蛋白污染

产品概述


Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit 是一种无需使用氯仿的即用型RNA抽提试剂盒。适用于动植物细胞、组织及细菌的RNA抽提。该试剂可在迅速裂解细胞或组织的同时灭活细胞释放出的核酸酶，保持 RNA 的完整性，提取的RNA无DNA与蛋白污染，可直接用于qPCR、Northern blot、dot blot、cDNA克隆、体外翻译等。

性能展示



Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit (A) 与 T品牌RNA提取试剂 (B) 提取A549细胞的RNA电泳图

操作流程

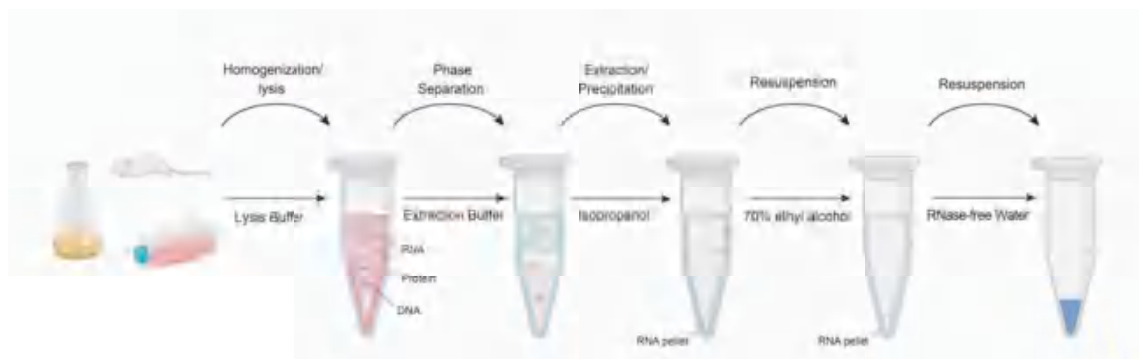

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB302-100T	Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit (无氯仿RNA提取试剂盒)	100T	380.00
NB302-200T	Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit (无氯仿RNA提取试剂盒)	200T	600.00
NB302-2x200T	Orizol Chloroform-Free RNA Extraction Kit (无氯仿RNA提取试剂盒)	2x200T	1100.00



Oriscience TurboPure Universal Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速高纯细胞/组织总RNA提取试剂盒)




产品特点与优势

- 快速高效---仅需10 min，提取到的RNA完整性好，纯度、浓度高
- 操作简便---全程可在室温操作
- 无氯仿-----实验过程无需氯仿，安全低毒

产品概述

Oriscience TurboPure Universal Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit 是一种高效RNA抽提高质量RNA的试剂盒，可快速的从细胞以及动物组织样本（心、肝、脾、肺、肾、鼠尾、爪、肌肉、耳等）中完成RNA抽提。该产品相比于传统RNA提取试剂，柱式法RNA提取试剂盒具有快速（仅需10 min）、高效(完整性好，纯度、浓度高)、操作简便（全过程可在常温操作）、无氯仿等特点。本试剂盒可在迅速裂解细胞或组织的同时抑制细胞释放出的核酸酶，保持RNA 的完整性，提取的RNA无DNA与蛋白污染，可直接用于qPCR、Northern blot、Dot blot、cDNA克隆、体外翻译等。

性能展示

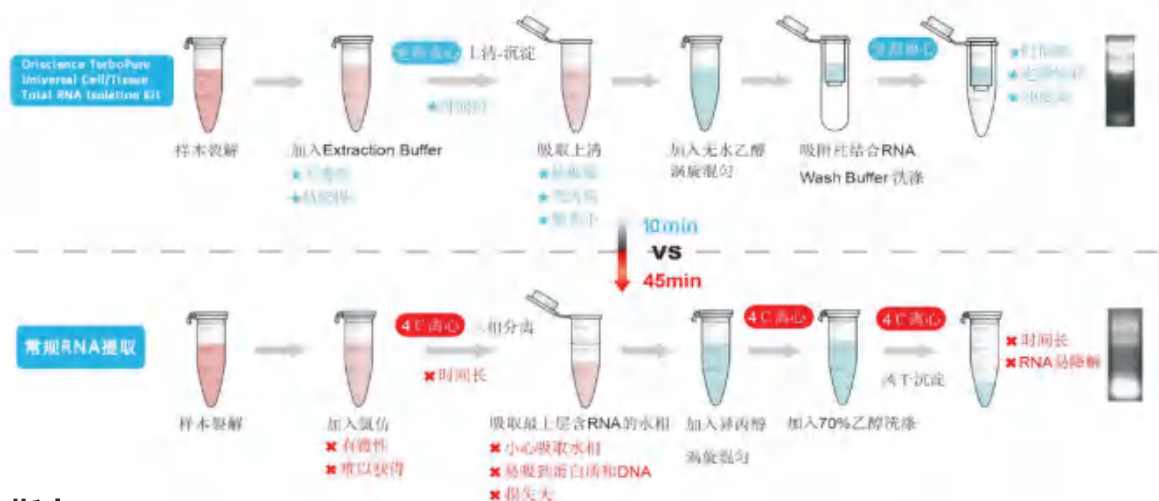

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB303-50T	Oriscience TurboPure Universal Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速高纯细胞/组织总RNA提取试剂盒)	50T	529.00
NB303-100T	Oriscience TurboPure Universal Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速高纯细胞/组织总RNA提取试剂盒)	100T	958.00
NB303-2x100T	Oriscience TurboPure Universal Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速高纯细胞/组织总RNA提取试剂盒)	2x100T	1558.00



Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速细胞/组织总RNA提取试剂盒)




产品特点与优势

- 操作简便---全程可在常温操作，无需低温
- 快速高效---仅需 6 min，提取的RNA完整性好，纯度、浓度高
- 安全低毒---无需使用 β -巯基乙醇和酚/氯仿等有毒有害试剂

产品概述

Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit是一种即用快速型RNA抽提试剂盒，适用于动物细胞、组织（心、肝、脾、肺、肾等）的RNA抽提。该产品相比于传统RNA提取试剂，柱式法RNA提取试剂盒具有快速（6min可完成RNA的提取）、高效（完整性好，纯度、浓度高）、操作简便（全过程可在常温操作）、无需使用 β -巯基乙醇和酚/氯仿等有毒有害试剂的特点，能在迅速裂解组织或细胞的同时抑制细胞释放出的核酸酶，保持RNA的完整性。试剂盒中DNA-Cleaning Column能够有效的吸附去除基因组DNA，RNA-Only Column能高效地结合RNA，提取的RNA无DNA与蛋白污染，可直接用于qPCR、Northern blot、Dot blot、cDNA克隆、体外翻译等。

性能展示

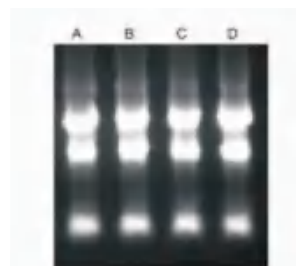

Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (A) 与A品牌RNA提取试剂 (B)、T品牌RNA提取试剂盒 (C)、F品牌RNA提取试剂盒 (D) 提取A549细胞的RNA电泳图

操作流程



选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB304-50T	Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速细胞/组织总RNA提取试剂盒)	50T	628.00
NB304-100T	Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速细胞/组织总RNA提取试剂盒)	100T	1136.00
NB304-2x100T	Oriscience UltraRapid Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit (快速细胞/组织总RNA提取试剂盒)	2x100T	1908.00



Oriscience First Strand cDNA Synthesis Kit (cDNA 第一链合成试剂盒)



产品特点与优势

- 高精度度--适用于长达13 kb的cDNA链合成
- 热稳定强--反转录酶在50°C时仍有良好活性
- 高灵敏度--兼容低起始量RNA模板的逆转录

产品概述

Oriscience First Strand cDNA Synthesis Kit cDNA 第一链合成试剂盒，用于从mRNA或总RNA 模板中高效合成cDNA第一链。该试剂盒使用经基因改造的Oriscript反转录酶，与AMV反转录酶相比，其RNase H活性较低。该酶在42-50 °C下保持活性，适用于长达13 kb的cDNA链合成。

本试剂盒提供两种cDNA 合成引物：Random Primer 和Oligo (dT)18 Primer，用户可根据需要，灵活选择逆转录引物进行后续实验，使用本试剂盒合成的cDNA，可以直接用于后续的常规PCR、qPCR、cDNA的第二链合成以及cDNA文库的构建等。

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NF101-50T	Oriscience First Strand cDNA Synthesis Kit (cDNA 第一链合成试剂盒)	50T	626.00
NF101-100T	Oriscience First Strand cDNA Synthesis Kit (cDNA 第一链合成试剂盒)	100T	1080.00



Oriscience Plasmid Mini Extraction Kit (质粒小提试剂盒)




产品特点与优势

- 安全性高---无苯酚、氯仿等有毒试剂
- 简单快速---采用先进的硅胶柱过滤操作，操作简便、节省时间
- 纯度高---提取到的质粒DNA纯度高，能满足于后续酶切、转化、测序等各种实验
- 性价比高---使用次数更多，经济实惠，极大减少实验成本

产品概述

Oriscience Plasmid Mini Extraction Kit是一种用于小量质粒快速抽提的离心柱式试剂盒。采用了改进的 SDS 碱裂解法，结合高质量离心吸附柱，达到快速提取质粒 DNA的目的。本试剂盒无需使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，无需乙醇沉淀，操作时间短，可在 30 min之内完成。提取的质粒纯净度高，可直接用于酶切、PCR、转化、测序等各种实验。

性能展示

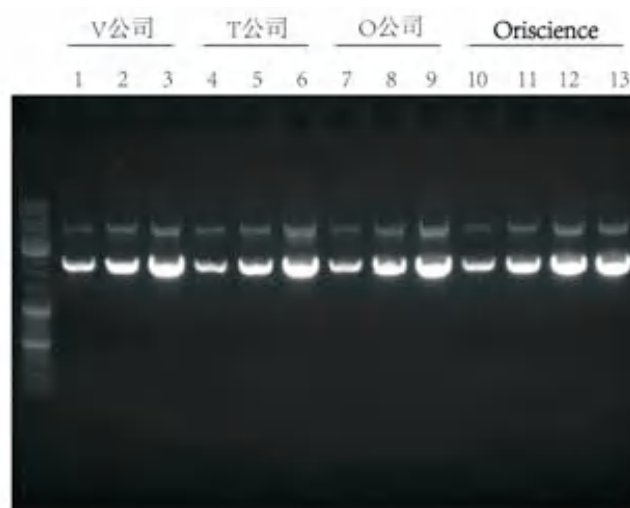

不同品牌质粒提取试剂盒与Oriiscience Plasmid Extraction Kit 提取产物电泳结果图

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB102-50T	Oriscience Plasmid Mini Extraction Kit (质粒小提试剂盒)	50T	140.00
NB102-100T	Oriscience Plasmid Mini Extraction Kit (质粒小提试剂盒)	100T	240.00
NB102-200T	Oriscience Plasmid Mini Extraction Kit (质粒小提试剂盒)	200T	390.00



Oriscience Fast Gel Recovery/DNA Purification Kit (快速胶回收/产物纯化试剂盒)




产品特点与优势

- 快速方便---操作步骤少，仅需10-15 min即可完成DNA片段回收
- 高效稳定---可以有效的回收到高纯度的目的DNA，并满足于后续实验
- 回收范围广---适用于100bp-10kb的DNA片段回收
- 安全环保---无需使用有机试剂抽提

产品概述

Oriscience Gel Recovery Kit是一种用于从琼脂糖凝胶中高效回收DNA片段的试剂盒。本产品采用优化的缓冲体系与高品质离心吸附柱，可从不同浓度的琼脂糖凝胶中高效回收DNA 片段。回收DNA片段范围大小为100 bp-10 kb，操作简单，时间短，仅需10-15 min即可完成。纯化的DNA可直接用于连接、酶切、PCR等分子生物学研究。

操作流程

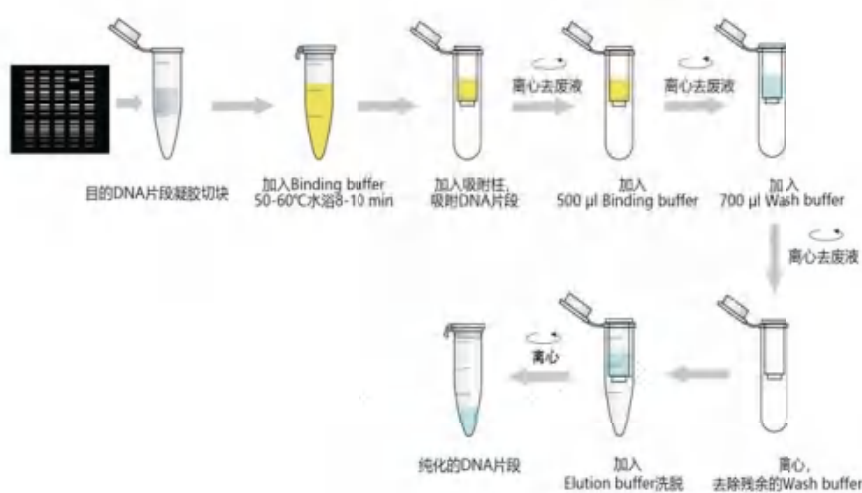

性能展示



O品牌胶回收试剂盒（左）
与Oriscience
Gel Recovery Kit（右）胶回
收产物电泳结果

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB402-50T	Oriscience Fast Gel Recovery/DNA Purification Kit (快速胶回收/产物纯化试剂盒)	50T	150.00
NB402-100T	Oriscience Fast Gel Recovery/DNA Purification Kit (快速胶回收/产物纯化试剂盒)	100T	250.00
NB402-200T	Oriscience Fast Gel Recovery/DNA Purification Kit (快速胶回收/产物纯化试剂盒)	200T	400.00



Oriscience Fast Endo-Free Plasmid Mini Extraction Kit (快速法无内毒素质粒小提试剂盒)




产品特点与优势

- 安全性高---无苯酚、氯仿等有毒试剂
- 简单快速---采用先进的硅胶柱过滤操作，操作简便、节省时间
- 无内毒素---纯化的质粒中内毒素含量远小于0.1EU/μg
- 应用广泛---纯化的质粒可直接用于转染、酶切、PCR、转化、测序等各种实验

产品概述

Oriscience Fast Endo-Free Plasmid Mini Extraction Kit 是一种用于小量 (1-5ml) 无内毒素质粒快速抽提的离心柱式试剂盒。采用了先进的内毒素吸附缓冲液 (Binding Solution)，能有效去除质粒中的内毒素污染，纯化的质粒中内毒素含量远小于0.1EU/μg，可大大提高转染实验效率和动物注射效果。本试剂盒无需使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，无需乙醇沉淀，操作时间短，可在 30-60min 之内完成。提取的质粒内毒素含量极低且纯净度高，可直接用于转染、酶切、PCR、转化、测序等各种实验。

性能展示

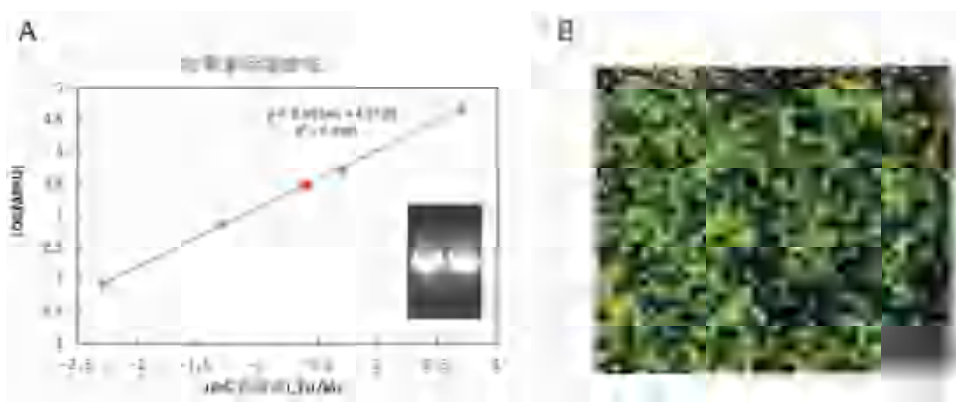

A.通过重组C因子内毒素检测试剂盒获取标曲，根据标准曲线计算出本产品所提取的质粒内毒素含量低于0.1EU/μg。

B.使用本产品提取的pcDNA3.1-EGFP质粒转染至293T细胞，转染48 h后EGFP荧光效果。

选购指南

产品货号	产品名称	产品规格	市场价
NB103-50T	Oriscience Fast Endo-Free Plasmid Mini Extraction Kit (快速法无内毒素质粒小提试剂盒)	50T	398.00
NB103-100T	Oriscience Fast Endo-Free Plasmid Mini Extraction Kit (快速法无内毒素质粒小提试剂盒)	100T	676.00
NB103-200T	Oriscience Fast Endo-Free Plasmid Mini Extraction Kit (快速法无内毒素质粒小提试剂盒)	200T	1081.00



Coming soon

产品	简介
Oriscience cDNA First Strand Synthesis Kit	一款cDNA 一键合成试剂盒, 15 min即可完成cDNA合成
Oriscience Rapid DNA Ligation Kit	一款快速DNA连接试剂盒, 5-10 min即可完成连接
Oriscience One-step seamless cloning kit	一款简单、快速且高效的DNA 无缝克隆试剂盒
Oriscience Annexin V-EGFP/PI Cell Apoptosis Detection Kit	一款灵敏性高、稳定性好的Annexin V-EGFP/PI细胞凋亡检测试剂盒
Oriscience Annexin V-488/PI Cell Apoptosis Detection Kit	一款快速简便的Annexin V-488/PI细胞凋亡检测试剂盒
Oriscience Annexin V-647/PI Cell Apoptosis Detection Kit	一款快速简便的Annexin V-647/PI细胞凋亡检测试剂盒
Oriscience Rapid Site-Directed Mutagenesis Kit	一款快速和高效的快速定点突变试剂盒
Fluorescence loading buffer for SDS-PAGE gel electrophoresis	一款简便、快速且灵敏的SDS-PAGE凝胶电泳的荧光上样缓冲液
Oriscience Protein prestained marker (10-250KD)	一款条带清晰, 分子量范围广的蛋白预染marker
Oriscience Bacterial Genomic DNA Extraction Kit	一款快速、方便的细菌基因组DNA提取试剂盒
Oriscience Plasmid Mini-Extraction Kit (Magnetic Bead Method)	一款简便、高效的质粒小提试剂盒 (磁珠法)

Oriscience Biotechnology Co., Ltd

400-158-2128



The Origin of Science
源于科学，服务科学

网址：www.oriscience.com

公司地址：四川省成都经济技术开发区成龙大道二段1666号C3栋

